


腹腔仿真 模擬訓練器





盆腔模型

將盆腔模型放置在底盤上
用白色螺絲拴緊

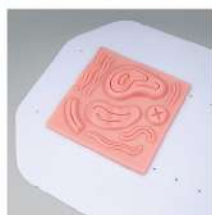

3D縫合模型

此類矽膠放置在底盤上即可



腸子模型

將腸子矽膠剪成適合長度
用鱷魚夾夾住兩端
再把吸盤吸附在底盤上



套扎模型

用大號夾子把套扎矽膠夾住
並用吸盤吸附在底盤上



剝離模型

此類矽膠放置在底盤上即可



定點縫合模型

此類矽膠放置在底盤上即可



剪切模型

用大號夾子把剪切片夾住
用鱷魚夾分別夾住兩個角
然後把吸盤吸附在底盤上



夾珠模型

將模型放置在底盤上
用白色螺絲拴緊



搬運模型

先將底板用白色塑膠頭螺絲固定在底盤上
橡皮筋連續套在柱子上圍成六邊形
再將兩種顏色的三角形放在柱子上



穿線模型

將模型放置在底盤上
用白色螺絲拴緊